


ETHICON

PART OF THE *Johnson & Johnson* FAMILY OF COMPANIES

DERMABOND®

Adhesivo Tisular

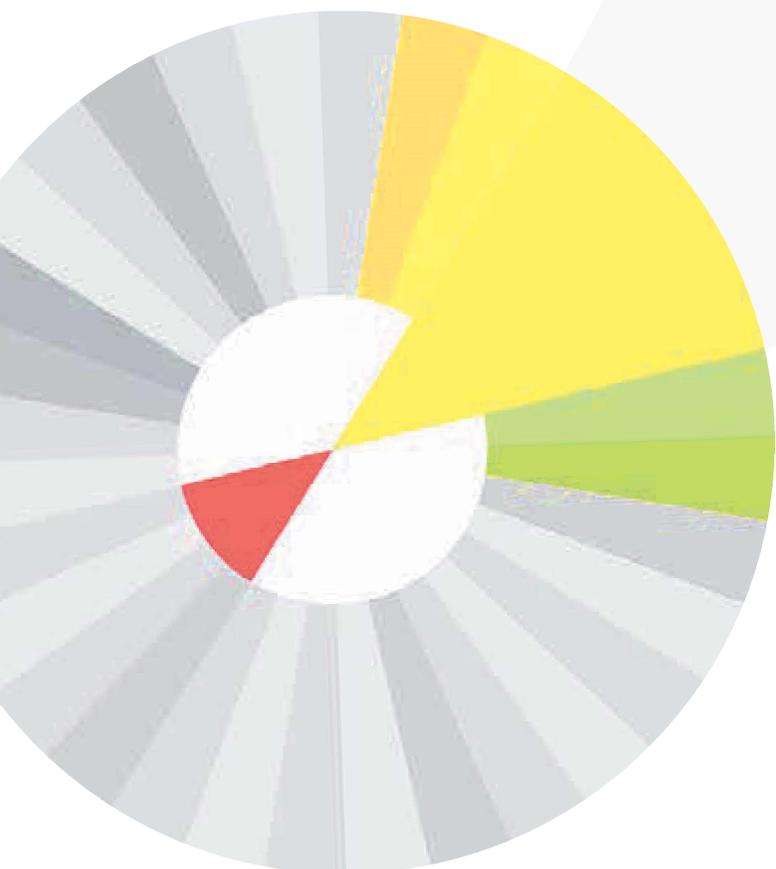

DERMABOND®

Adhesivo Tisular

DERMABOND® es un adhesivo tópico para la piel, estéril, que contiene una formulación monomérica (2 octil cianocrilato) y el colorante D y C Violeta # 2. Se presenta en aplicador de uso único empacado en un envase de burbuja. Al aplicarse a la piel, el líquido adhesivo es ligeramente más viscoso que el agua y polimeriza en minutos.

Indicaciones

DERMABOND® está diseñado para aplicación tópica, únicamente para mantener aproximados los bordes de la piel de heridas de incisiones quirúrgicas, incluyendo punciones de cirugía de invasión mínima, y laceraciones simples por traumatismos, en las que se ha llevado a cabo limpieza completa. DERMABOND puede usarse en combinación con, pero no en lugar de suturas subcutáneas.

Presentación

DERMABOND® viene en un aplicador estéril prellenado, de uso único. Está disponible en las siguientes presentaciones: DERMABOND ALTA VISCOSIDAD, DERMABOND MINI, DERMABOND PROPEN Y DERMABOND PROPEN XL. El aplicador está disponible en 0.25 ml, 0.50 ml y 0.75 ml de líquido adhesivo. El aplicador está empacado en envase de burbuja para mantenerlo estéril hasta que se abra o dañe. DERMABOND está disponible en cajas de 6 o 12 ampollas, según su presentación.

Almacenamiento

Condiciones de almacenamiento recomendadas: por debajo de 30° C (86° F) lejos de la humedad y el calor directo. No usar después de la fecha de vencimiento.

Esterilidad

DERMABOND® se esteriliza originalmente con calor seco y gas óxido de etileno. No reesterilizar. No usar si el empaque está abierto o dañado. Desechar cualquier material no usado después de terminar el procedimiento médico.

DERMABOND®

ADHESIVO TISULAR

2-Ocil Cianoacrilato

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	CANTIDAD POR CAJA
AHVM12	Dermabond® MINI Adhesivo Tópico para la Piel (2-Octil Cianoacrilato) - Mini - Alta Viscosidad	0.36ml	12
AHV12	Dermabond® ALTA VISCOSIDAD Adhesivo Tópico para la Piel (2-Octil Cianoacrilato) - Alta Viscosidad	0.5ml	12
APP6	Dermabond® PROPEN Adhesivo Tópico para la Piel (2-Octil Cianoacrilato) - Alta Viscosidad - Aplicador Propen	0.5ml	6
APPXL6	Dermabond® PROPEN XL Adhesivo Tópico para la Piel (2-Octil Cianoacrilato) - Alta Viscosidad - Aplicador Propen	0.75ml	6